

More features in OpenDocViewer

This continues the [Getting started guide](#): features that not everyone needs every day, but that are good to know about. Read the section you need.

The pictures show a made-up test document, in the Swedish interface; the button names here are the English ones. [Download the guide as PDF](#).

Compare two pages

Document metadata

Sharper PDF pages

Custom size and default zoom

All keyboard shortcuts


The toolbar button by button

Dark theme

Support information

Compare two pages

Click the **compare button** in the toolbar (*Enable compare mode*). The page you are looking at moves to the left with a **blue frame**, and a second page is shown on the right with an **orange frame**. To swap the right-hand page: right-click a thumbnail and choose *Show to right*.

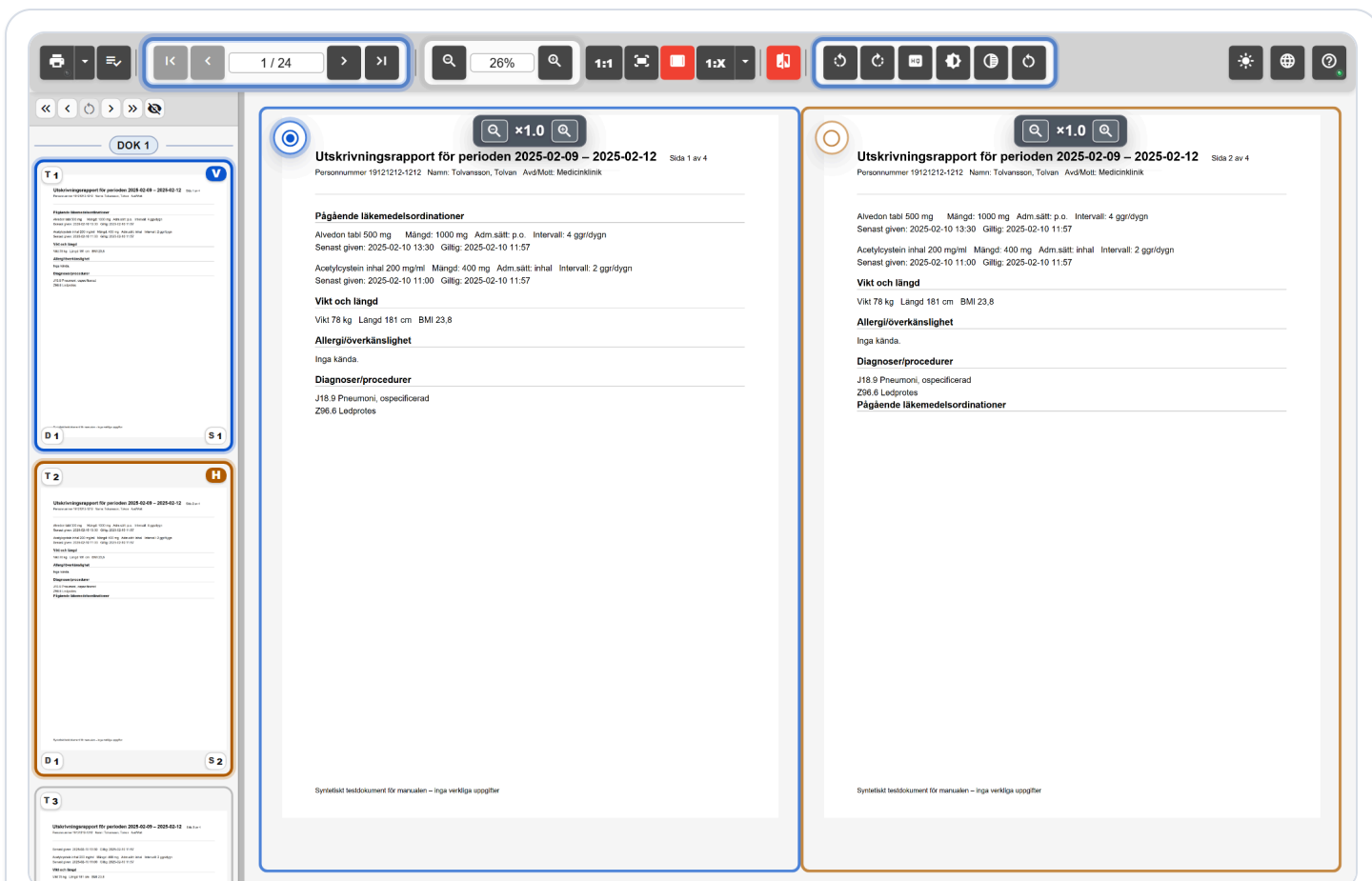

Compare mode. Each page has its own zoom buttons along the top. In the pane, the left page is marked **V** and the right page **H** (Swedish for left and right).

One of the pages is always **active** – the one you last clicked in. The toolbar and the keyboard control the active page, and the frames around the buttons show which one: blue for left, orange for right.

If you print with the **Active page** method while comparing, you can choose to include only the active page or *Both compare pages*. The pages are printed exactly as you see them – rotation, brightness and contrast are included, just as when you look at a single page. With every other print method, the pages are printed as they are in the archive.

▼ Controlling the other page without switching

Hold **Shift** while you click a button or use the keyboard, and the command applies to the page that is *not* active. The frames change colour while you hold Shift, so you can see what will happen.



Shift held down. Orange frames = the buttons control the right page right now.

Arrow Left and **Arrow Right** switch the active page. **Arrow Left** when the left page is already active ends the comparison – so does the compare button, or *Close comparison* in the right-click menu on the right-hand page.

-
- A right-click context menu is displayed over a document thumbnail. The menu contains four items, each with an icon and text in Swedish. The first item has a document icon with a magnifying glass. The second has a minus sign in a circle. The third has a flag icon. The fourth has a crossed-out arrow icon.
- Visa metadata för dokument
 - Dölj denna sida
 - Dölj dokument 1/5
 - Avsluta jämförelse

Right-clicking the right page. The usual options, plus *Close comparison*.

Document metadata

Right-click a thumbnail or the page and choose **Show document metadata**. You see the information the system that opened ODV sent with the document – for example ID,

name, department, date, number of pages and document ID. Which fields exist depends on that system. The information is for display only and cannot be changed in ODV.

The screenshot shows a document viewer interface. On the left, there is a sidebar with a list of documents. The main area displays a document titled 'Dokument 1 av 4'. A modal dialog box titled 'Dokumentmetadata' is open, showing the following metadata for 'Dokument 1 av 4':

FÄLT	VÄRDE	ID
Personnummer	19121212-1212	1001
Namn	Tolvansson, Tolvan	1002
Avd/Mott	Medicinklinik Råvårde: MED	1011
Datum	2025-02-12	1003
Created_TS	2025-02-12T14:02:00	500
Modified_TS	2025-02-12T14:02:00	502
NumberOfPages	4	504
DokumentId	A1F4-1001	15

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Metadata-tabell' and 'Stäng'.

▼ All documents in one table



The *Metadata table* button in the metadata dialog shows the whole session as a table – one document per row. Handy when you want to see at a glance which departments and dates are included.

Metadataöversikt									
5 dokument och 9 metadatafält ingår i denna översikt.									
DOKUMENT	PERSONNUMMER	NAMN	AVD/MOTT	DATUM	CREATED_TS	MODIFIED_TS	NUMBEROF PAGES	DOKUMENTID	DATUM
	1001	1002	1011	1003	500	502	504	15	1007
Dokument 1 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvårde: MED	2025-02-12	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	4	A1F4-1001	—
Dokument 2 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvårde: MED	2025-02-10	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	6	A1F4-1002	—
Dokument 3 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Röntgenavdelning Råvårde: RTG	—	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	3	A1F4-1003	2025-02-0
Dokument 4 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvårde: MED	2025-02-12	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	2	A1F4-1004	—
Dokument 5 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Klinisk kemi Råvårde: LAB	2025-02-08	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	9	A1F4-1005	—

Document metadata overview.

Sharper PDF pages

PDF pages are already shown in print quality. If you need to see a detail even more sharply: click **HQ** in the toolbar (*Increase PDF page resolution*). The page is redrawn at double resolution and the button turns red. It applies only to that page.

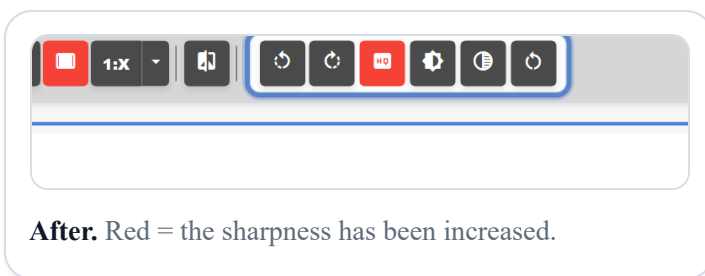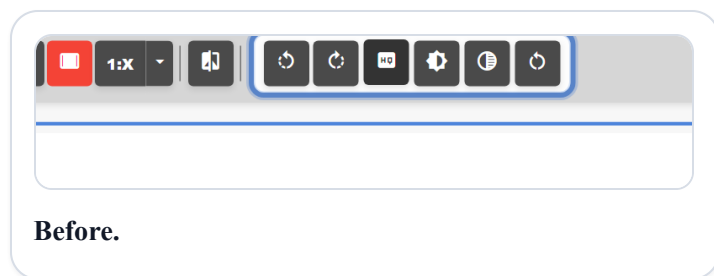

HQ is grey for scanned pages (TIFF/JPEG), because they are already shown exactly as sharp as they were scanned. Hover over the button to see why.

Custom size and default zoom

The **1:X** button (*Custom size*) shows the page at a size you choose yourself – a share of the window width. The arrow next to it opens the settings. There you also choose which zoom every new session should start with (*Default zoom/size*); your organization decides the default. ODV remembers your choices.

1:1

1:X

Egen storlek (max % av)

Lämna tomt för att använda standardvärden.

Fönsterbredd

Avancerat

Standard zoom/storlek

Används vid varje ny session.

Faktisk storlek (1:1)

Anpassa till skärm

Egen storlek

Anpassa till bredd

Custom size. Share of the window width and default zoom.

1:1

1:X

Egen storlek (max % av)

Lämna tomt för att använda standardvärden.

Fönsterbredd

Avancerat

Fönsterhöjd

Faktisk storlek

Standard zoom/storlek

Används vid varje ny session.

Faktisk storlek (1:1)

Anpassa till skärm

Egen storlek

Anpassa till bredd

Advanced. Limits for window height and actual size.

All keyboard shortcuts

Key	Does this
Arrow Up / Arrow Down , Page Up / Page Down	Previous or next page. Hold down to browse quickly.
Home / End	First or last page.

Key	Does this
Ctrl + any of the above	The same, but document by document instead of page by page.
+ / -	Zoom in or out.
Ctrl + Arrow Left / Arrow Right	Rotate the page.
Arrow Left / Arrow Right	In compare mode: switch the active page. Arrow Left when the left page is already active ends the comparison.
Shift + command	In compare mode: control the page that is not active.
Delete / Ctrl + Delete	Hide the page / hide the whole document (selection).
Ctrl + P	Open ODV's print dialog.
Esc	Close menus, dialogs and the preview.

The toolbar button by button



Left: print with an arrow for the default, selection, page navigation, zoom out/in with a percentage box, 1:1, fit to screen, fit to width.



Right: 1:X custom size with an arrow, compare, rotate left/right, HQ, brightness, contrast, reset, and theme, language and help.

- **Print** opens printing. The arrow next to it sets the default, *Active page* or *All pages*.
- **Selection** opens the selection workspace. Red when a selection is active.
- **Page navigation:** first, previous, next, last, and a box for the page number.

- **Zoom:** out, in, percentage box, 1:1, fit to screen, fit to width.
- **1:X:** custom size. **Compare:** two pages side by side. **Rotate:** a quarter turn.
- **HQ:** sharper PDF page. **Brightness, contrast** and **reset**.
- **Theme, language, help.** The light on the help button: green = all is well, yellow = the computer is low on memory, red = error.

Dark theme

The theme menu at the far right has *Normal*, *Light* and *Dark*. In the dark theme the interface turns dark while the document page is shown as usual.

Utskrivningsrapport för perioden 2025-02-09 – 2025-02-12 Sida 1 av 4

Personnummer 19121212-1212 Namn: Tolvansson, Tolvan Avd/Mott: Medicinklinik

Pågående läkemedelsordinationer

Alvedon tabl 500 mg Mängd: 1000 mg Adm.sätt: p.o. Intervall: 4 ggr/dygn
 Senast given: 2025-02-10 13:30 Giltig: 2025-02-10 11:57

Acetylcystein inhal 200 mg/ml Mängd: 400 mg Adm.sätt: inhal Intervall: 2 ggr/dygn
 Senast given: 2025-02-10 11:00 Giltig: 2025-02-10 11:57

Vikt och längd

Vikt 78 kg Längd 181 cm BMI 23,8

Allergi/överkänslighet

Inga kända.

Diagnoser/procedurer

J18.9 Pneumoni, ospecifierad
 Z96.6 Ledprotes

Dark theme.

Support information

Turn to **your local support** first – they know how ODV is installed and set up in your organization, and can pass the case on to the supplier. Two things make it much easier to help you: the **version** and the **diagnostics file**. Both are under the help menu → *About OpenDocViewer*.

Good to include in the ticket:

- **Version and build ID** from *About OpenDocViewer*.
- **The diagnostics file** (*Download diagnostics JSON*). It contains technical information about ODV and the browser – no documents.
- **When** it happened (date and time), **what you did** and which **browser** you used.
- The text under *Technical details* if an error box was shown.

Do not send personal data. Do not attach screenshots or printouts that show real documents, names or ID numbers, unless your organization has explicitly asked for them.




The screenshot shows the 'Om OpenDocViewer' dialog box with the following fields:

- Version: 2.8.0
- Build-id: 2.8.0-stable
- Projekt: <https://github.com/Optimal2/OpenDocViewer>
- Kontakt: dev@optimal2.se
- Diagnostik

Buttons at the bottom: 'Ladda om resursfiler' and 'Stäng'.

About OpenDocViewer. Version, build ID and contact details. *Reload resource files* fetches translations and settings again without restarting.

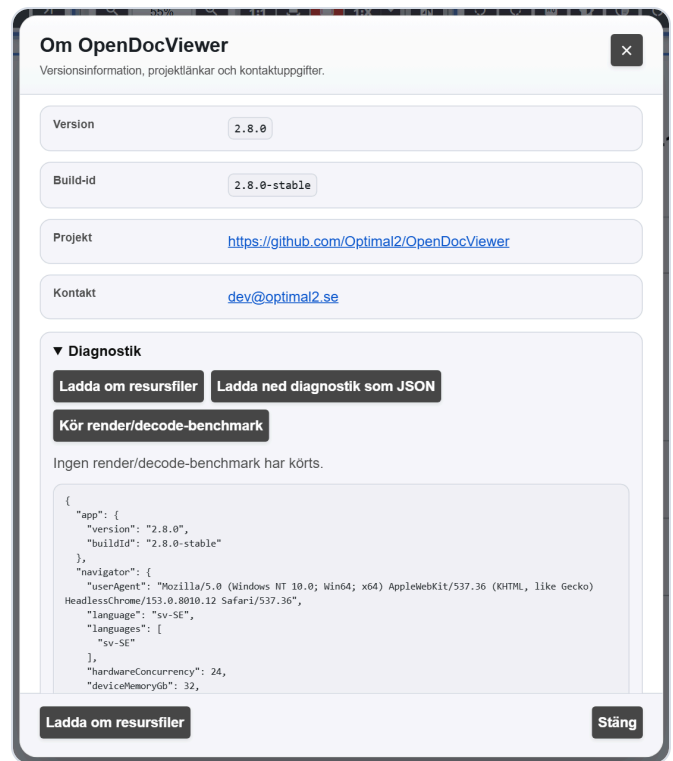

The screenshot shows the 'Om OpenDocViewer' dialog box with the 'Diagnostik' section expanded. It contains the following buttons:

- Ladda om resursfiler
- Ladda ned diagnostik som JSON
- Kör render/decode-benchmark

Below the buttons, it says: 'Ingen render/decode-benchmark har körts.'

The 'Kör render/decode-benchmark' button is highlighted, showing the following JSON output:

```
{
  "app": {
    "version": "2.8.0",
    "buildId": "2.8.0-stable"
  },
  "navigator": {
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/153.0.8010.12 Safari/537.36",
    "language": "sv-SE",
    "languages": [
      "sv-SE"
    ],
    "hardwareConcurrency": 24,
    "deviceMemoryGb": 32,
  }
}
```

Buttons at the bottom: 'Ladda om resursfiler' and 'Stäng'.

Diagnostics. *Download diagnostics JSON* gives you a file to attach to the ticket. It contains technical information – no documents.

▼ When the session has expired

The box *The documents could not be shown correctly* has a *Technical details* link.

Expand it to see which pages could not be fetched and why. Include that in the ticket.



Expired session.



Technical details.

Back to [Getting started with OpenDocViewer](#). This guide covers OpenDocViewer 2.8.

Updated 2026-09-26.